

REF CA618



- + Stabile Ausführung
- + Optional mit Eimer zu verwenden
- + Ermöglicht ein leichteres Aufstehen
- + Inkl. Spritzschutz

---

# Toilettensitzgestell


## Noah

# Toilettensitzgestell

## Noah

Noah ist ein Toilettensitzgestell zum Aufsetzen auf die vorhandene Toilette und passt über handelsübliche WC-Becken. Das Toilettensitzgestell erhöht die Sitzhöhe der Toilette und ermöglicht damit eine bessere Sitzposition. Das Gestell besteht aus einem höhenverstellbaren Rohrrahmen mit vier rutschsicheren Füßen, Armlehnen, sowie einem stabilen Toilettensitz mit Deckel. Ein Spritzschutz unter der Sitzfläche sorgt für die nötige Hygiene am WC. Durch die Armlehnen gibt das Toilettensitzgestell beim Aufstehen und Hinsetzen zusätzlich Sicherheit. Toilettensitzgestelle werden vorwiegend eingesetzt, wenn eine feste Montage von Stützgriffen nicht möglich ist (z.B. fehlende Tragfähigkeit). Durch den mitgelieferten Eimer und WC-Deckel, kann das Toilettensitzgestell auch als Toilettenstuhl ohne vorhandenes WC genutzt werden. Wird der Eimer nicht genutzt, kann dieser platzsparend zusammengeklappt werden.

### + Produkteigenschaften

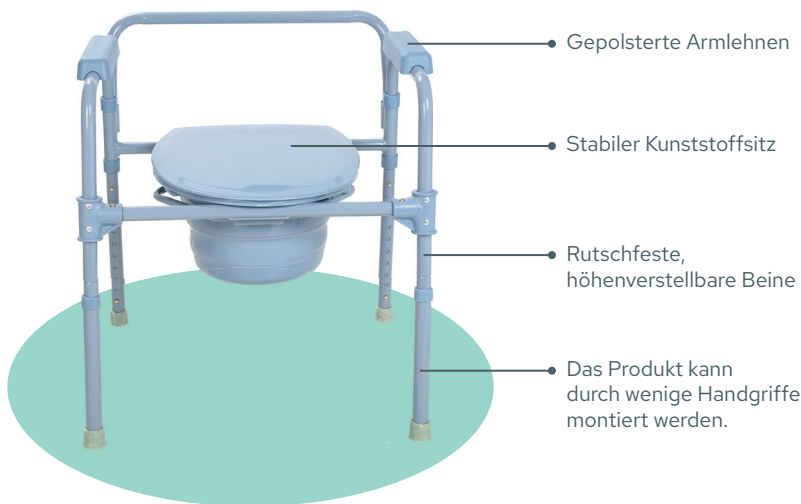

### Angewandte Qualitätsstandards

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß Regel 1 des Anhangs VIII der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) über Medizinprodukte.



**Foshan Shunkangda Medical Tech Co. Ltd.**  
Pingnan Industrial Area, Guicheng Nanhai District  
528251 Foshan City, Guangdong, China



**unizell Medicare GmbH**  
Pohnsdorfer Straße 3, 23611 Bad Schwartau, Germany



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



**Praximedico AG**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland



**forma-complete GmbH**  
Bleichelistrasse 22, 9055 Bühler, Switzerland  
CHE-140.749.240



**Gebrauchsanweisung beachten!**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen!  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.unizell.de](http://www.unizell.de)



Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch!

**PZN 18094332**

Hilfsmittelnummer  
**beantragt**

Artikelnummer  
**CA618**



### + Technische Daten



**Sitzbreite**  
47 cm



**Sitztiefe**  
39 cm



**Sitzhöhe**  
40-55 cm



**Höhe Rückenlehne**  
60-75 cm



**Gesamtlänge**  
55 cm



**Gesamthöhe**  
60-75 cm



**Gesamtbreite**  
51 cm



**Höhenverstellung um**  
10 cm



**Produktgewicht**  
6,2 kg



**Max. Benutzergewicht**  
135 kg